

Mini CEX

Anlage einer Zervikalstütze

von:

Simon Thelen

Tim Lögters

Klinik für Unfall- und Handchirurgie
(Direktor: Univ.-Prof. Dr. Joachim Windolf)


Zervikalstütze (Stiffneck)



Zervikalstütze (Stiffneck)




Zervikalstütze (Stiffneck)

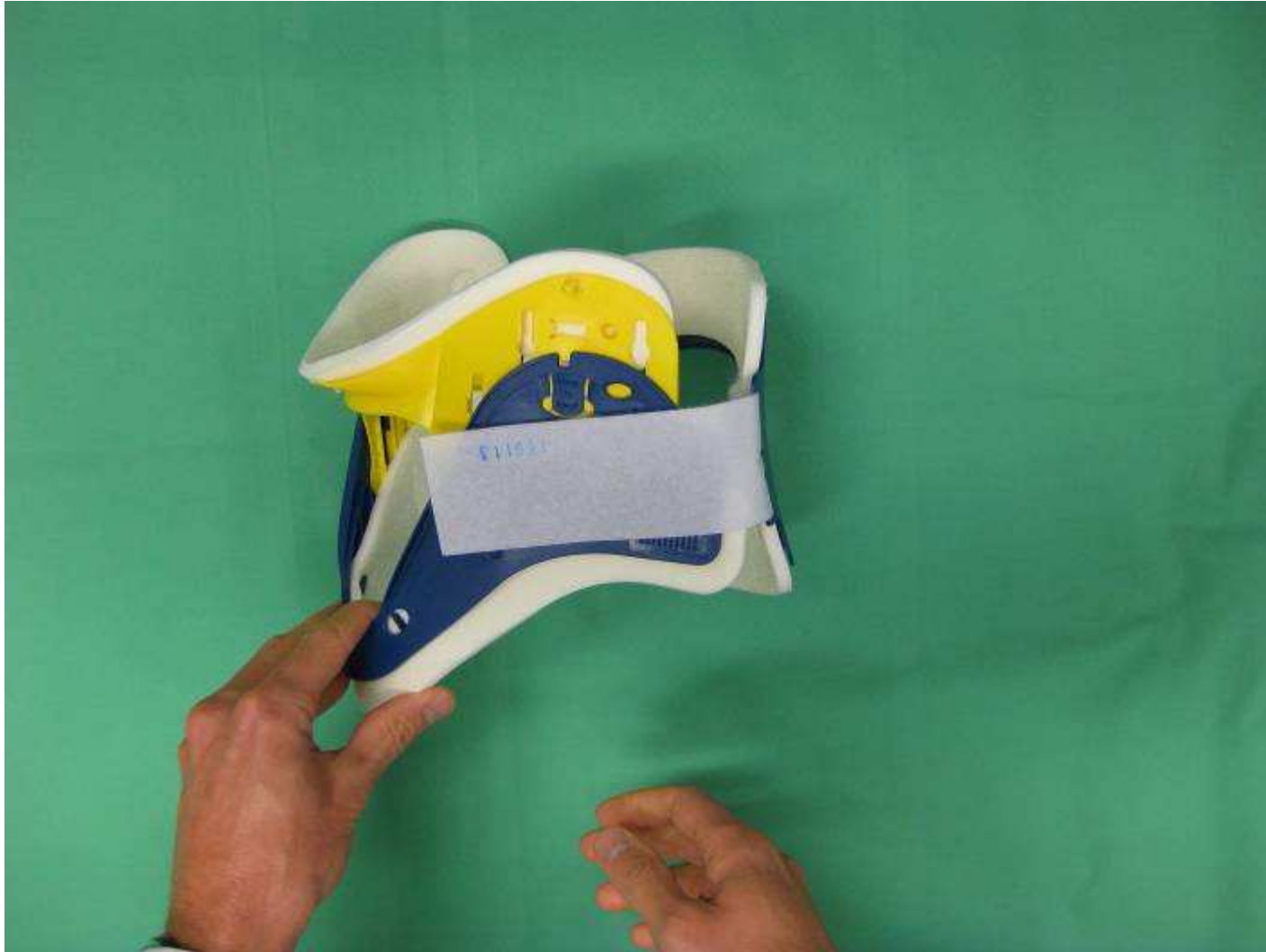

Manuelle Abschätzung der Halslänge



Abgeschätzte Halslänge auf Stütze übertragen

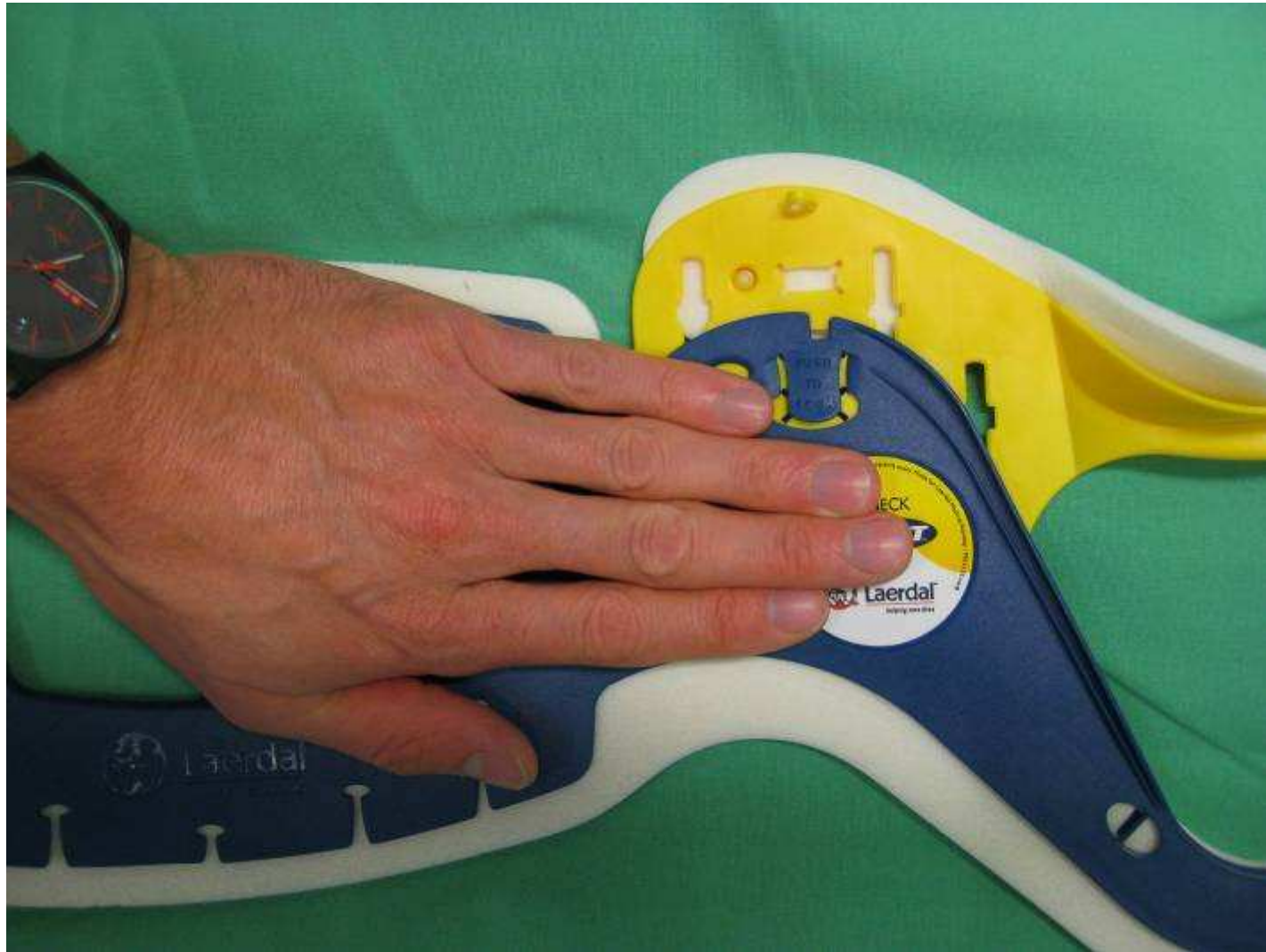

Einstellung der Halslänge

- no neck
- small
- regular
- tall



Einstellung der Halslänge



Einstellung der Halslänge



Einstellung der Größe



„Push button to lock“

Immobilisation der HWS in Neutralposition durch Assistent(in)



Unterschieden der Zervikalstütze



Unterschieden der Zervikalstütze



Unterschieden der Zervikalstütze



Umklappen des vorderen Anteils



Umklappen des vorderen Anteils



Schließen der Zervikalstütze



Prüfung des korrekten Sitzes



Prüfung des korrekten Sitzes



Überprüfung etwaiger Druckstellen



Korrekt angelegte Zervikalstütze



Korrekt angelegte Zervikalstütze

